



w.styler 泰勒



美国Tyler泰勒 RO-TAP® 筛分系统

W. S. TYLER 泰勒



W.S.Tyler (Tyler) 在颗粒分析, 工业编织线, 过滤和建筑网格等领域处于领导地位。我们不仅仅是生产者,更是客户的合作伙伴。我们对待客户的方式直接反映了我们对待团队的方式。我们认为客户服务是一种心态, 而不是业务部门。在W.S.Tyler, 您不仅是客户, 更是家人。我们不仅是制造高度专业化丝网的领导者, 而且我们在网格的设计和工程设计方面处于最前沿, 可以满足客户不断变化的需求。W.S.Tyler集团 (Tyler group) 不断研发新技术, 以协助客户发展自己的业务。

通过与我们的德国母公司HAVER&BOECKER合作, 我们继续寻找新方法刺激研发新技术。我们坚持不懈地致力于创新, 同时坚守我们的根基。泰勒名字的传承对我们很重要, 我们所做的一切都是建立在尊重我们前人基础上的。

我们的客户欣赏的不仅是我们的产品和服务的质量, 还有我们实用而有效的方法以及我们在每次互动中表现出的决心。我们每天都在为客户和我们自己成长而奋斗。我们知道, 最小的细节通常会对我们的客户产生巨大的影响。这就是为什么我们在所有工作中都如此细致。在W.S.Tyler (Tyler) 没有解决不了的问题, 没有太小的粒子, 地平线也不会太遥远。



世界标准:

1910年泰勒介绍了科学设计的试验筛系列, 被称为泰勒标准筛系列。这是当今用于颗粒分析ASTM E-11标准制定的基础, 已经成为Tyler声誉的重要组成部分。

该系列筛的粒度标准变得尤为重要, 它通过了由美国和许多其它国家制定的标准。某些筛子已经成为国际筛分标准的参考。



RX-29-10/RX-30-10 振筛仪



适配Ø8", 12"筛网

2

RO-TAP® E 电磁振筛仪



适配Ø8"筛网

3

RX-812 粗筛仪



适配Ø8", 12"筛网

4

RX-94 振筛仪



适配Ø8"筛网

5

相关附件



6

标准筛网



9



RX-29-10



RX-30-10

在振筛仪的行业标准中，W.S. Tyler的RO-TAP® 振筛仪具有独特的二维操作：水平圆周运动和垂直敲击运动。这种特殊的筛分动作使样品颗粒分层并“寻找”筛网中的标准口径，使筛分更加高效。该型号设备提供最准确和一致性的颗粒分析测试。RX-29型号设计用于用Ø8”的测试筛；RX-30型号设计用于Ø12”的测试筛。

- 耐用，少维护
- 适用于大量样品
- 0~99min定时功能，控制精确度到1秒
- 每台设备都经过出厂测试检验

应用领域



医药



食品



化学



采矿



农业

技术参数

型号	RX-29	RX-30
订货号	RX-29-10	RX-30-10
筛网数目	6个×8英寸全高筛网	4个×12英寸全高筛网
	13个×8英寸半高筛网	8个×12英寸半高筛网
转速	278±10 rpm	
每分钟敲击数	150±5	
外部尺寸	710×540×640mm(B×D×H)	
重量	82Kg	
电源	230V, 50Hz	
标配	仅主机，筛网需要另外购买	



订货信息

订货号	描述
RX-29-10	振筛仪，Ø8英寸筛网专用，LCD数显时间，可定时，可容纳6个全高或13个半高筛网
RX-30-10	振筛仪，Ø12英寸筛网专用，LCD数显时间，可定时，可容纳4个全高或8个半高筛网



RO-TAP E Pure



RO-TAP E Premium



RO-TAP E Premium Remote

RO-TAP® 电磁振筛仪可适用于直径为8”的测试筛，并提供精确的筛分结果。紧凑的RO-TAP E Pure、RO-TAP E Premium和RO-TAP E Premium Remote（8英寸测试筛）装置在实验室工作台上需要的空间很小。RO-TAP Premium Remote控制面板于主机分离，可远程控制，方便操作。该型号设备应用于中小型测试。

- 振幅恒定，处理量大
- 数字控制
- 快速装卸
- 振荡幅度可调

应用领域



医药



食品



化学



采矿



农业

技术参数

型号	RO-TAP E Pure	RO-TAP E Premium	RO-TAP E Premium Remote
订货号	RX-29-E	RX-29-E Premium	550100
筛网数目	9个×8英寸全高筛网	9个×8英寸全高筛网	9个×8英寸全高筛网
	15个×8英寸半高筛网	15个×8英寸半高筛网	15个×8英寸半高筛网
筛分方式	干筛	干筛	干筛/湿筛
外部尺寸	385×295×895mm (L×W×H)	385×295×875mm(L×W×H)	385×295×875mm(L×W×H)
重量	37Kg	37Kg	37Kg
电源	230V, 50Hz		
标配	仅主机，筛网需要另外购买		

订货信息

订货号	描述
RX-29-E	振筛仪，Ø8英寸筛网专用，可容纳9个全高或15个半高筛网
RX-29-E Premium	振筛仪，Ø8英寸筛网专用，可容纳9个全高或15个半高筛网
550100	振筛仪，Ø8英寸筛网专用，可容纳9个全高或15个半高筛网
560210	选配件：双螺母夹
R-30033-E	选配件：双螺母夹紧系统套件





专为粗略测试应用而设计，RX-812粗筛仪具有独特设计，只需使用快速适配器即可适配直径8"和12"的测试筛。RX-812运行噪声低，并采取有效控制，可提供一致，准确的结果。

- 设计用于直径8"和12"的测试筛
- 用于分析US # 100目（150μm）和更大直径的颗粒
- 仅摆动运动
- 随附用于直径8"和12"测试筛的适配器
- 每分钟振荡：280（60Hz）；231（50Hz）

*不建议用于150μm（100目或更细）颗粒的分析

应用领域



医药



食品



化学



采矿



农业

技术参数

型号	RX-812	
订货号	RX-812-3	
筛网数目	6个×8英寸全高筛网	4个×12英寸全高筛网
	13个×8英寸半高筛网	6个×12英寸半高筛网
转速	278 ± 10 rpm (60 Hz), 231 ± 10 rpm (50Hz)	
振荡位移	1-1/8 in.×7/16 in.	
外部尺寸	750×680×560mm(L×W×H)	
重量	110Kg	
电源	230V, 50Hz	
标配	仅主机，筛网需要另外购买	

订货信息

订货号	描述
RX-812-3	振筛仪，可容纳6个全高或13个半高Ø8英寸的筛网，可容纳4个全高或6个半高Ø12英寸的筛网



RO-TAP® RX-94测试筛振荡器采用了与RX-29和RX-30型号相同的传统设计。该设备还具有一个大的工作空间，可容纳两列直径8”的测试筛。对于同一测试，在相同的时间内，使处理能力提高了一倍

- 设计仅用于直径8”的测试筛
- 测试应用筛网孔径：635目（20μm）至2英寸
- 全新设计的易锁装夹系统

技术参数

型号	RX-94
订货号	RX-94-3
筛网数目	2列6个×8英寸全高筛网
	2列13个×8英寸半高筛网
转速	278 ± 10 rpm
振荡位移	1-1/8 in.×7/16 in.
每分钟敲击数	150 ± 10
外部尺寸	750×680×560mm (L×W×H)
重量	110Kg
电源	230V, 50Hz
标配	仅主机，筛网需要另外购买

应用领域



医药



食品



化学



采矿



农业

订货信息

订货号	描述
RX-94-3	振筛仪，Ø8英寸筛网专用，可容纳2列6个全高或13个半高筛网



RO-TAP® 振筛仪维护套件

为了确保持久可靠的运转，必要时更换RO-TAP筛分设备配件，延长其使用寿命，获得更高的成本效益。维修套件可用于更换正常磨损的零件。W.S.Tyler建议使用这些维修套件，以最大程度地减少因配件损坏导致的停机时间。还建议每台新的RO-TAP振筛仪均购买备用维护套件。

套件订货号	订货号	描述
10121	R-10034	2个偏心盘，适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10061	1个法兰衬套，适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10062	1个轴承，适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10066A	1个软木，适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10063	2个法兰轴承，适配RX-29, RX-30, RX-94
10122	R-10034	2个偏心盘，适配RX-29
	R-10061	1个法兰衬套，适配RX-29
	R-10062	1个轴承，适配RX-29
	R-10066A	1个软木，适配RX-29
	R-10063	2个法兰轴承，适配RX-29
	R-10058	1个同步带，适配RX-29
	R-30008	1个上载板，适配RX-29
	R-20039	1个凸轮齿轮，适配RX-29
10123	R-30015	1个同步皮带轮，适配RX-29
	R-10034	2个偏心盘，适配RX-29
	R-10061	1个法兰衬套，适配RX-29
	R-10062	1个轴承，适配RX-29
	R-10066A	1个软木，适配RX-29
	R-10063	2个法兰轴承，适配RX-29
	R-10058	1个同步带，适配RX-29
	R-20039	1个凸轮齿轮，适配RX-29
	R-30015	1个同步皮带轮，适配RX-29





RO-TAP®隔音箱和支架

专为与Ro-Tap振筛仪而设计，其工作噪音水平从大约85dB降低到78dB。隔音柜由18号钢和1英寸金属面隔音泡沫内衬制成。

Ro-Tap支架是专门为RX-29和RX-30 Ro-Tap振筛仪和RX-812粗筛仪设计的。

- 安装设置简单快速
- 美观，坚固的钢结构，支架稳定牢靠
- 可最佳利用实验室空间

订货号	描述
R-30050	隔音柜，适配RX-29和RX-30，89×60×74cm (L×W×H)
RX-99	隔音柜，适配RX-94，86×83×78cm (L×W×H)
R-40041	支架，适用RX-29，RX-30，RX-812，250×81×71cm (L×W×H)
R-10099-30	配件：带球头螺栓的盖弹簧，适用RX-99



RX-20 旋转振筛仪

RX-20旋转筛以经济的包装提供经典的设计和高效的的操作。基于多年前开发流行设计，一种被许多DOT首选的经过验证的筛分方法。旋转筛可提供从8-12英寸或200-300mm直径的筛子更快地筛分测试。容量范围从六个带接受盘的12英寸全高筛到最多二十个带接受盘的8英寸半高筛。

全封闭的机柜可确保安全，无尘的运行。单独的敲击锤有助于颗粒快速筛分通过。数字计时器具有一个LED显示屏，定时范围0-99min，精确+/-1秒。该系统由1/3马力电动机驱动。

- 准确的结果
- 简单高效
- 尺寸：49×66×147 cm
- 大约运输重量：215磅

订货号	描述
RX-20	旋转振筛仪，适配Ø8"，12"筛网



超声波测试筛清洁仪

在清洁液槽中产生超声波振动，使污染物从筛框和介质中清除。

- 仅8"或200mm直径的测试筛
- 轻巧便携
- 不锈钢清洗罐
- 内置计时器
- 设备重量：6kg
- 不含溶液（建议使用温和的洗涤剂）

订货号	描述
P-1405	适用于8"测试筛，Ø24×25cm



湿试筛套件

当样品不溶于水时，可以在潮湿的环境中进行测试。（套件不包括RO-TAP振动筛）

- 适用于RX-29和RX-94振荡筛
- 套件重量：27磅

订货号	描述
LA11112	适配RX-29
LA11194	适配RX-94
8498	带孔筛盖
8495	带孔接收盘



取样器

将材料样品减少或减少一半以进行筛分测试。分离器保持代表性的粒度分布，同时减小了原始样品的量。

订货号	描述
SS-50	带14个1/2"卸料槽，最大颗粒1/8"，30×36×30cm（L×W×H），5kg
SS-100	带16个1/2"卸料槽，最大颗粒1/4"，56×41×41cm（L×W×H），10kg



旋转分装盘

RX-230旋转分装盘使用振动给料机，使不锈钢漏斗的物料流恒定持续。振动送料器从1到16个依次送入采样管。随后可以将每个样品管加盖并立即保存，以最少的操作减少外部污染。旋转分装盘是干燥、自由流动的颗粒的精确可靠采样的首选方法。该设备减少或消除操作员的操作错误和其他类型相关采样设备的偏差。
RX-230旋转分装盘包括16个分装口，一组16个标准试管，一个容纳容器的样品鼓和一个用于将容器定位在鼓中的漏斗板。所有这些零件都可更换。

订货号	描述
RX-230	33×52×58 cm（L×W×H），25磅





美国Tyler 标准试验筛是Tyler公司最经典的一款泰勒筛，被很多知名公司采用，并成熟应用于多个行业，如制药行业、食品行业、烟草行业、金属矿产行业、化工行业、粮食、饲料和材料行业等。

试验筛经过序列化，并具有试验筛合规证书。符合ASTME-11-09标准。如需了解具有NIST 可溯源校准报告的网筛、网筛盖及接收盘，请联系我们。

特点

- 材质：全不锈钢筛网、全铜筛网、铜筛网不锈钢框
- 直径：Ø8" (203mm) 常用， Ø12" (305mm)
- 高度：全高2" (51mm) 常用， 半高1" (25mm)
- 每个筛网标配一份出厂合格证书



Ø8" 筛网

描述		不锈钢框架/不锈钢网线		黄铜框架/不锈钢网线		黄铜框架/黄铜网线	
U.S.STD.	公制	全高	半高	全高	半高	全高	半高
4 "	—	5167	—	4835	—	—	—
3-1/2 "	90mm	5168	—	4836	—	—	—
3 "	75mm	5169	—	4837	—	—	—
2-1/2 "	63mm	5170	—	4838	—	—	—
2.12 "	53mm	5171	—	4839	—	—	—
2 "	50mm	5172	—	4840	—	—	—
1-3/4 "	45mm	5173	—	4841	—	—	—
1-1/2 "	37.5mm	5174	—	4842	—	—	—
1-1/4 "	31.5mm	5175	—	4843	—	—	—
1.06 "	26.5mm	5176	—	4844	—	—	—
1 "	25.0mm	5177	—	4845	—	—	—
7/8 "	22.4mm	5178	—	4846	—	—	—
3/4 "	19.0mm	5179	—	4847	—	—	—
5/8 "	16.0mm	5180	—	4848	—	—	—
0.53 "	13.2mm	5181	—	4849	—	—	—
1/2 "	12.5mm	5182	—	4850	—	—	—
7/16 "	11.2mm	5183	—	4851	—	—	—
3/8 "	9.5mm	5184	—	4852	—	—	—
5/16 "	8.0mm	5185	—	4853	—	—	—
0.265 "	6.7mm	5186	—	4854	—	—	—
1/4 "	6.3mm	5187	5353	4855	5021	—	—
No. 3-1/2	5.6mm	5188	5354	4856	5022	—	—
No. 4	4.75mm	5189	5355	4857	5023	—	—
No. 5	4.0mm	5190	5356	4858	5024	—	—
No. 6	3.35mm	5191	5357	4859	5025	—	—
*1/8"	3.15mm	2058	3279	3281	2059	—	—
No. 7	2.8mm	5192	5358	4860	5026	—	—
No. 8	2.36mm	5193	5359	4861	5027	4529	4695
No. 10	2.0mm	5194	5360	4862	5028	4530	4696
No. 12	1.7mm	5195	5361	4863	5029	4531	4697
No. 14	1.4mm	5196	5362	4864	5030	4532	4698
No.16	1.18mm	5197	5363	4865	5031	4533	4699
No.18	1.0mm	5198	5364	4866	5032	4534	4700
No.20	850µm	5199	5365	4867	5033	4535	4701
No.25	710µm	5200	5366	4868	5034	4536	4702
No.30	600µm	5201	5367	4869	5035	4537	4703
No.35	500µm	5202	5368	4870	5036	4538	4704
No.40	425µm	5203	5369	4871	5037	4539	4705
No.45	355µm	5204	5370	4872	5038	4540	4706
No.50	300µm	5205	5371	4873	5039	4541	4707
No.60	250µm	5206	5372	4874	5040	4542	4708
No.70	212µm	5207	5373	4875	5041	4543	4709
No.80	180µm	5208	5374	4876	5042	4544	4710
No.100	150µm	5209	5375	4877	5043	4545	4711
No.120	125µm	5210	5376	4878	5044	4546	4712
No.140	106µm	5211	5377	4879	5045	4547	4713
No.170	90µm	5212	5378	4880	5046	4548	4714
No.200	75µm	5213	5379	4881	5047	4549	4715
No.230	63µm	5214	5380	4882	5048	4550	4716
No.270	53µm	5215	5381	4883	5049	4551	4717
No.325	45µm	5216	5382	4884	5050	4552	4718
No.400	38µm	5217	5383	4885	5051	—	—
No.450	32µm	5256	5389	4887	2113	—	—
No.500	25µm	5218	5384	4886	5052	—	—
No.635	20µm	5257	5391	2295	2296	—	—
接收盘/筛盖							
8491	不锈钢接收盘, 适用于Ø8"筛网						
8497	不锈钢筛盖, 带拉环, 适用于Ø8"筛网						

描述		不锈钢框架/不锈钢网线			黄铜框架/不锈钢网线			黄铜框架/黄铜网线	
U.S.STD.	公制	全高	中间高度	半高	全高	中间高度	半高	全高	半高
4 "	100mm	6635	2300	6801	6967	7200	2297	—	—
3-1/2 "	90mm	6636	9109	6802	6968	7201	2298	—	—
3 "	75mm	6637	2155	6803	6969	7202	7135	—	—
2-1/2 "	63mm	6638	9281	6804	6970	7203	7136	—	—
2.12 "	53mm	6639	2301	6805	6971	7204	7137	—	—
2 "	50mm	6640	9282	6806	6972	7205	7138	—	—
1-3/4 "	45mm	6641	6705	6807	6973	7206	7139	—	—
1-1/2 "	37.5mm	6642	9193	6808	6974	7207	7140	—	—
1-1/4 "	31.5mm	6643	9194	6809	6975	7208	7141	—	—
1.06 "	26.5mm	6644	2302	6810	6976	7209	7142	—	—
1 "	25.0mm	6645	9195	6811	6977	7210	7143	—	—
7/8 "	22.4mm	6646	6704	6812	6978	7211	7144	—	—
3/4 "	19.0mm	6647	9196	6813	6979	7212	7145	—	—
5/8 "	16.0mm	6648	9411	6814	6980	7213	7146	—	—
0.53 "	13.2mm	6649	9431	6815	6981	7214	7147	—	—
1/2 "	12.5mm	6650	9197	6816	6982	7215	7148	—	—
7/16 "	11.2mm	6651	6702	6817	6983	7216	7149	—	—
3/8 "	9.5mm	6652	9198	6818	6984	7217	7150	—	—
5/16 "	8.0mm	6653	6703	6819	6985	7218	7151	—	—
0.265 "	6.7mm	6654	2303	6820	6986	7219	7152	—	—
1/4 "	6.3mm	6655	9199	6821	6987	7220	7153	—	—
No. 3-1/2	5.6mm	6656	2218	6822	6988	7221	7154	—	—
No. 4	4.75mm	6657	9280	6823	6989	7222	7155	—	—
No. 5	4.0mm	6658	9098	6824	6990	7223	7156	—	—
No. 6	3.35mm	6659	9113	6825	6991	7224	7157	—	—
No. 7	2.8mm	6660	9099	6826	6992	7225	7158	—	—
No. 8	2.36mm	6661	9100	6827	6993	7226	7159	6329	6495
No. 10	2.0mm	6662	9214	6828	6994	7227	7160	6330	6496
No. 12	1.7mm	6663	9136	6829	6995	7228	7161	6331	6497
No. 14	1.4mm	6664	9271	6830	6996	7229	7162	6332	6498
No.16	1.18mm	6665	9148	6831	6997	7230	7163	6333	6499
No.18	1.0mm	6666	9079	6832	6998	7231	7164	6334	6500
No.20	850µm	6667	9080	6833	6999	7232	7165	6335	6501
No.25	710µm	6668	9081	6834	7000	7233	7166	6336	6502
No.30	600µm	6669	9082	6835	7001	7234	7167	6337	6503
No.35	500µm	6670	9083	6836	7002	7235	7168	6338	6504
No.40	425µm	6671	9084	6837	7003	7236	7169	6339	6505
No.45	355µm	6672	9085	6838	7004	7237	7170	6340	6506
No.50	300µm	6673	9086	6839	7005	7238	7171	6341	6507
No.60	250µm	6674	9087	6840	7006	7239	7172	6342	6508
No.70	212µm	6675	9149	6841	7007	7240	7173	6343	6509
No.80	180µm	6676	9215	6842	7008	7241	7174	6344	6510
No.100	150µm	6677	9088	6843	7009	7242	7175	6345	6511
No.120	125µm	6678	9089	6844	7010	7243	7176	6346	6512
No.140	106µm	6679	9010	6845	7011	7244	7177	6347	6513
No.170	90µm	6680	9090	6846	7012	7245	7178	6348	6514
No.200	75µm	6681	9091	6847	7013	7246	7179	6349	6515
No.230	63µm	6682	9092	6848	7014	7247	7180	6350	6516
No.270	53µm	6683	9093	6849	7015	7248	7181	6351	6517
No.325	45µm	6684	9094	6850	7016	7249	7182	6352	6518
No.400	38µm	6685	9013	6851	7017	7250	7183	—	—
No.450	32µm	6762	2304	6856	2299	7251	2153	—	—
No.500	25µm	6686	9212	6852	7018	7252	7184	—	—

W.S. TYLER®

TEST SIEVE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

8570 TYLER BLVD., MENTOR, OHIO 44060 USA


This Certificate of Compliance represents W.S. Tyler's commitment to deliver test sieves of the highest quality. As part of our quality commitment, W.S. Tyler maintains ISO 9001-2015 Registration. This test sieve was manufactured to conform to the requirements of one or more of the following standards:

ASTM E 11
ASTM E 323

ISO 565
ISO 3310

BS 410

Serial Number:

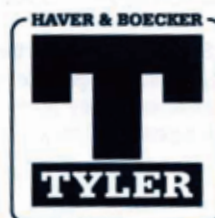

WARRANTY AND LIMITATION

W.S. TYLER Industrial Group

W.S. Tyler warrants, commencing with the date of first use and for a period of twelve (12) months thereafter, its Particle Analysis Products to be free from defects in workmanship and materials.

If, within such warranty period, any new product shall be proved to W.S. Tyler's satisfaction to be defective, it shall be repaired or, at W. S. Tyler's option, replaced F.O.B. factory without charge.

W.S. Tyler's obligation hereunder shall be confined to such repair or replacement and does not include any charges, direct or indirect, for shipping, removing, or installing defective products.

No warranty shall apply to used products nor to products which have been furnished, repaired or altered by others so as, in W.S. Tyler's judgment, to affect the same adversely or which shall have been subject to negligence, accident or improper care, installation, maintenance, storage or other than normal use or service.

W.S. TYLER'S EXPRESSED WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTIES, GUARANTEES OR REMEDIES OF ANY KIND WHETHER STATUTORY, WRITTEN, ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY.

The liability of W.S. Tyler arising out of the manufacture, sale, delivery, use or resale of the product, whether based on warranty, contract, negligence, tort, strict liability or otherwise, and whether for direct, indirect, special, consequential, exemplary, punitive or other damage, shall not exceed the cost of replacement of the product. Upon the expiration of the warranty, all such liability shall terminate.

IN NO EVENT SHALL W.S. TYLER BE LIABLE FOR LOSS OF PROFITS, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ATTRIBUTABLE TO DEFECTS IN MATERIAL FURNISHED, PRODUCT IDENTIFICATION DELAYS IN DELIVERY OR OTHERWISE.

Laboratory Equipment warranties are null and void if other than W.S. Tyler Service parts are used.



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that

W.S. TYLER

8570 Tyler Blvd., Mentor, Ohio 44060 USA

operates a

Quality Management System

which complies with the requirements of

ISO 9001:2015

for the following scope of certification

Design and manufacture of sieves, sieve shakers, filtration products, and fabricated wire cloth products, the distribution of roll goods and architectural wire products; the servicing of computerized particle analyzers; and the provision of laboratory services.

Certificate No.: CERT-0120614

File No.: 007162

Issue Date: June 28, 2018

Original Certification Date: January 10, 1995

Certification Effective Date: June 27, 2018

Certificate Expiry Date: June 26, 2021

Kevin Goodwin
General Manager Technical Services
SAI Global Assurance



ISO 9001



Registered by:
QMI-SAI Canada Limited (SAI Global), 20 Carlson Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada. This registration is subject to the SAI Global Terms and Conditions for Certification. While all due care and skill was exercised in carrying out this assessment, SAI Global accepts responsibility only for proven negligence. This certificate remains the property of SAI Global and must be returned to them upon request.
To verify that this certificate is current, please refer to the SAI Global On-Line Certification Register: www.qmi-saiglobal.com/qmi_companies/





w.styler 泰勒

